

BVS-S

Fiche Technique PORTIQUE MURAL

DESCRIPTION

Portique à fixer au mur ou sur une plaque au sol, pour examens des patients debout ou assis. Facile à installer, utilisation simple, aussi en cas des patients de haute stature. L'unité a été étudiée pour les examens des chevilles, des genoux, de la colonne vertébrale, du thorax et du crâne.

Equipé d'un Potter Bucky pour cassettes jusqu'au format 35x43 cm.

Hauteur de la table réglable manuellement, système de blocage mécanique dans la position désirée.

Chargement de la cassette de côté droit ou gauche.

A la demande, on peut installer un Potter Bucky avec chargeur de cassette automatique où avec senseur (à utiliser avec un système de collimation automatique).

Tous les Potter Buckys peuvent utiliser des chambres de mesure pour régulateur automatique du temps d'exposition



BMI
BIOMEDICAL INTERNATIONAL



BVS-S

Fiche Technique PORTIQUE MURAL

POTTER BUCKY ALIMENTATION


DONNE TECHNIQUE

230 V monophasé 50/60 Hz, 24 Vdc

- Potter Bucky pour tous les formats des cassettes de 13x18 à 35x43 cm, chargement des deux côtés.
- Grille mobile R= 10:1, 103 lignes/”
- F= 150 cm
-

CHARACTERISTIQUE PRINCIPALES

- Déplacement vertical contrebalancé avec poids:150 cm
- Basement
- Poids: 120 kg

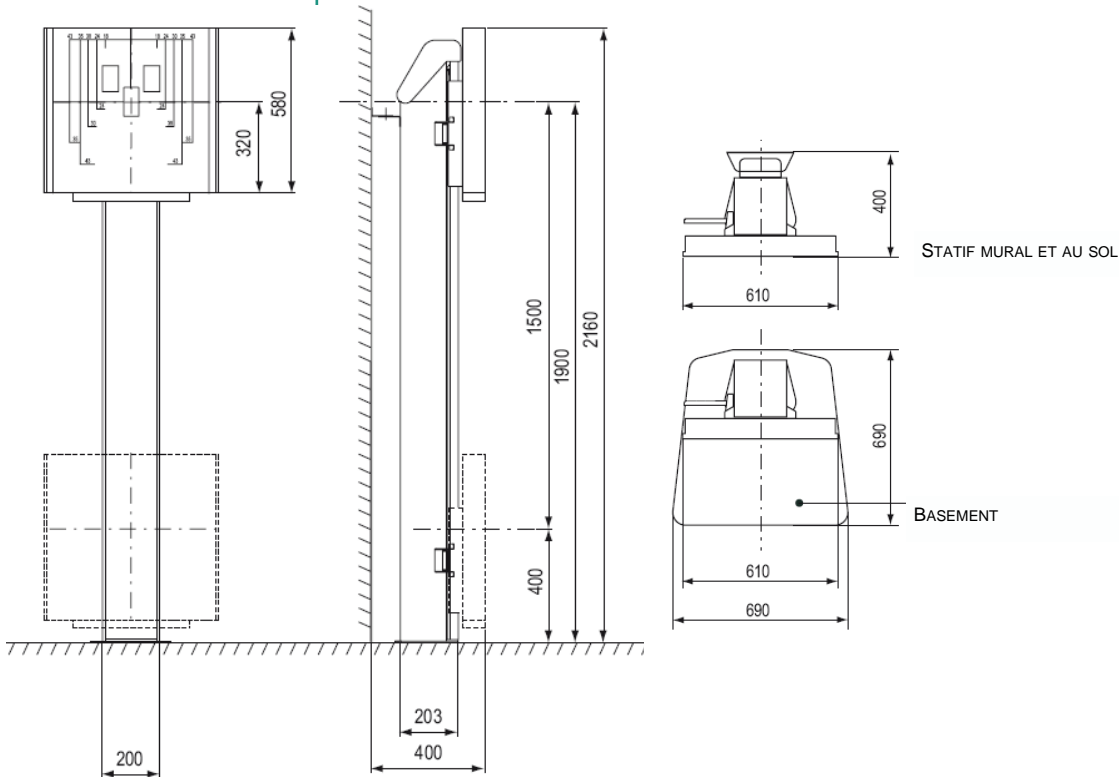

PD-38-F Rev. 00 20.04.2009

FICHE TECHNIQUE POURRA ÊTRE MODIFIE SANS PRÉAVIS